



Hygiene-  
Zertifikat



## custo cardio 400

EKG-Sauganlage mit integriertem  
12-Kanal-EKG der neuesten Generation

hygienisch - komfortabel - funktionell



NEU

MODERNSTE EKG-TECHNOLOGIE

## custo cardio 400 Ruhe-EKG

„2 in 1“ EKG + Sauganlage mit Hygienezertifikat

Schrittmacher Amplituden- und Breitenvermessung

Abtastrate bis zu 32kHz




Hygiene-Zertifikat

Saugleitungen durch Stecksystem einfach wechselbar

USB, BT oder W-LAN

BESTE EKG-SIGNAL-QUALITÄT

## custo cardio 400 Belastungs-EKG

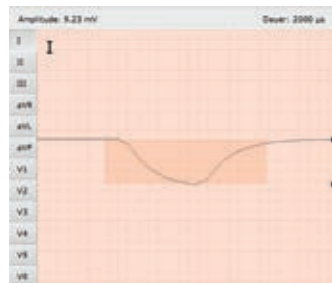

Schrittmacher-Impuls-Vermessung

klare Darstellung des EKGs und ermöglicht einen präziseren

**EKG-Signalqualität:** Die custo TRUE WAVE® Filtertechnologie garantiert unter allen Umständen eine perfekte EKG-Signal-Qualität.

**Schrittmacher-Vermessung:** Die hohe Abtastrate von 32 kHz sorgt für eine kristallklare Darstellung des EKGs und ermöglicht einen präziseren

Einblick in die Schrittmacher-Signale. Erstmals ist es möglich die Schrittmacher-Impuls-Amplituden und -Breiten exakt zu vermessen.

**Funktionalität:** Die bionischen Eigenschaften der Elektroden machen das Anlegen schnell und sicher. Durch die benopten, patentierten Kontaktflächen entfällt die Rasur der Haut. Optimierter Workflow durch PC-Ansteuerung und automatisches Ablösen der Elektroden nach Beendigung der EKG-Aufzeichnung.

**Patientenkomfort:** Die spezielle Form und Haftungseigenschaften der Elektroden benötigen bei gleicher Anhaftungsqualität einen signifikant niedrigeren Saugdruck.

**Produktlebensdauer:** Die integrierte Bauweise der cardio 400 mit automatischem Durchlüftungsprogramm der Saugleitungen erhöht die Lebensdauer des Gesamtsystems.

**Hygiene:** Die wechselbaren, wiederverwendbaren Elektroden garantieren, dass jeder Patient eine hygienisch

einwandfreie Elektrode erhält. Zeitraubendes Desinfizieren und die notwendige Einwirkzeit entfallen. Mit Hygienezertifikat der Deutschen Gesellschaft für Hygiene.


# custo TRUE WAVE® Filter

ANFORDERUNGEN	IIR FILTER	TRUE WAVE® FILTER
Original EKG	✓	✓
Hohe Offsetkompensation		✓
Schnelle Offsetkompensation		✓
Zuverlässige Störunterdrückung		✓
Echtzeitverhalten	✓	

## Zahlen und Fakten

- TRUE WAVE® Filter 0,05-125 Hz ist Standard
- TRUE WAVE® verzerrt keine EKG-Bestandteile (nach EN 60601-2-25)
- TRUE WAVE® erzeugt eine Verzögerung von max. 2 Sekunden
- TRUE WAVE® ersetzt Anti-Drift Filter (Signalverfälschung)
- TRUE WAVE® Belastungs-EKG Filter für hohe Geschwindigkeiten jenseits von 16 km/h
- Schrittmacherkontrolle mit IIR Filter (0,05-125 Hz) ohne Verzögerung

## Beispiele

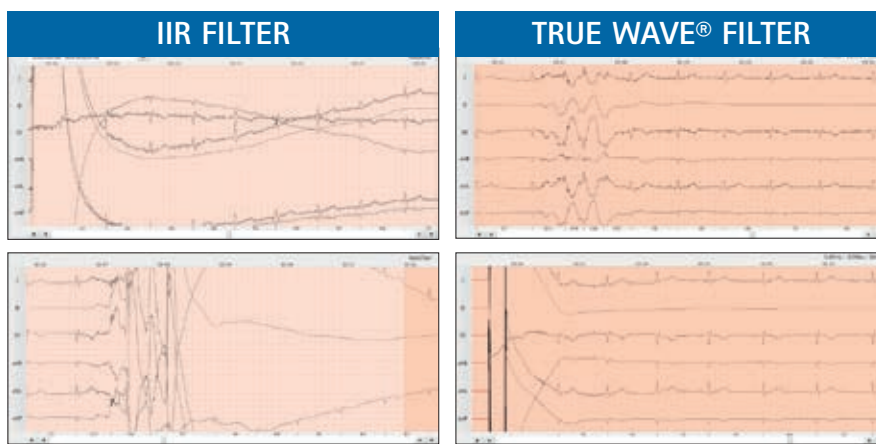

**Fax: 089 7109810**

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: 089 710 98 00 • E-Mail: info@customed.de  
 Bitte ausfüllen und an custo med faxen oder in einem Briefumschlag an custo med senden.

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zur custo cardio 400

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zum custo cardio 400 Ruhe-EKG Messplatz

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zum custo cardio 400 Belastungs-EKG Messplatz

Bitte senden Sie Informationsmaterial:

Ruhe-/Belastungs-EKG

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

EKG-Telemonitoring und Prävention

Anschrift:

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Praxisstempel